

# Tom 5

Manuel utilisateur

## Table des matières

### Table des matières

Table des matières .....	1
<b>Utilisation prévue .....</b>	<b>2</b>
<b>Garantie.....</b>	<b>3</b>
<b>Notes de sécurité et d'avertissement.....</b>	<b>4</b>
<b>Transport.....</b>	<b>6</b>
<b>Vue d'ensemble de la Tom5 Streater .....</b>	<b>7</b>
<b>Spécifications techniques.....</b>	<b>8</b>
Configuration.....	8
Déballage du Tom5 Streater .....	10
<b>Assemblage du Tom5 Streater .....</b>	<b>10</b>
<b>Ajustement.....</b>	<b>14</b>
<b>Utilisation quotidienne .....</b>	<b>18</b>
<b>Accessoires.....</b>	<b>24</b>
<b>Instructions de nettoyage .....</b>	<b>39</b>
<b>Entretien .....</b>	<b>39</b>

### **IMPORTANT:**

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante :

Sans frais : 1-888-752-8818

Téléphone : 1-450-759-9449

Télécopieur : 1-450-752-1644

Courriel :

[info@synetikergocare.ca](mailto:info@synetikergocare.ca) site Web

: [www.synetikergocare.com](http://www.synetikergocare.com)

Heures d'ouverture : 8 h à 16 h, heure de l'Est

N'utilisez que des pièces et accessoires fournis par Synetik ErgoCare. Toute substitution de pièces par celles d'une autre société entraînera la perte de garantie et pourra causer des dommages.

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser la poussette pour la première fois et conservez-le pour référence ultérieure. La sécurité d'un enfant pourrait être compromise si vous ne suivez pas les instructions et les consignes de sécurité mentionnées dans le Guide de l'utilisateur.

En cas de défauts apparents, qui limitent l'utilisation sûre du produit (par exemple, le châssis est endommagé, il y a des fissures ou une déformation visible), il est impératif de cesser immédiatement d'utiliser le produit et de contacter votre distributeur ou votre centre de réparation local. . Synetik ErgoCare n'assume aucune responsabilité pour les dommages et accidents causés par une mauvaise utilisation de ses produits.

## **Utilisation prévue**

Le fauteuil roulant de style poussette TOM5 Streeeter est disponible en 3 tailles (mini, standard et maxi). TOM5 est conçu pour une utilisation à court et à long terme d'enfants ayant des besoins spéciaux Ce fauteuil roulant de type poussette intègre la méthode de production ALUX pour une durabilité élevée et un faible poids du châssis. Le TOM 5 est l'un des fauteuils roulants de type poussette les plus légers de sa catégorie. L'unité de siège est détachable, réversible et entièrement réglable en taille et en position. Il intègre également la conception innovante MONOSLIDE ainsi que le système télescopique à commande électronique inclinable dans l'espace et le système flexible de fixation des dispositifs de retenue et des accessoires de positionnement. Cadre entièrement pliable même avec siège attaché. La coque souple est recouverte d'un rembourrage rembourré entièrement détachable dans un design à la mode. Acier massif pour une promenade sur table. Vous trouverez tous les détails dans la section montage et sur notre site web : [www.syntikergocare.com](http://www.syntikergocare.com).

## Garantie

1. Une garantie de 24 mois est applicable sur ce produit à compter de la date d'achat. La garantie s'applique aux défauts de matériaux et de fabrication.
2. La garantie est applicable à l'endroit où le produit a été acheté ou dans un atelier de réparation agréé.
3. Un certificat de garantie dûment rempli et une copie de la preuve d'achat doivent être présentés lors de la demande de garantie. Ne retirez pas l'étiquette d'identification . Il doit être lisible et intact pendant toute la période de garantie.
5. Le produit doit être utilisé entièrement aux fins pour lesquelles il a été conçu. L'utilisateur doit suivre les instructions mentionnées dans le mode d'emploi. Le fabricant/distributeur n'est pas responsable des défauts causés par toute manipulation contraire au mode d'emploi.
6. Le produit doit être utilisé, traité, entretenu et entreposé correctement conformément au mode d'emploi mentionné dans le mode d'emploi.
7. Une procédure de garantie peut être engagée si le produit faisant l'objet de la réclamation a été retourné entièrement dans son emballage d'origine, soigneusement emballé et protégé contre les dommages. Le propriétaire est tenu de s'assurer que le produit faisant l'objet de la réclamation est correctement nettoyé et conforme aux principes généraux d'hygiène. Le propriétaire ne peut pas demander au vendeur d'effectuer l'entretien ou le nettoyage de base du produit tout au long de la procédure de réclamation.
8. Tous les défauts doivent être réclamés immédiatement.
9. La garantie est perdue si les défauts ont été causés par une surcharge, un accident, une violence ou une altération ou une mauvaise manipulation inappropriée du produit.

Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez contacter notre service clientèle.

## IDENTIFICATION SHEET

Identification tag / Product type (write up):



Final inspection:

Name:

Signature:

## Notes de sécurité et d'avertissement

**ATTENTION!** Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser la poussette pour la première fois et conservez-le pour référence supplémentaire. La sécurité d'un enfant peut être menacée si les instructions et les informations de sécurité énumérées dans le Guide de l'utilisateur ne sont pas respectées.

Points de sécurité à prendre en compte lors de l'utilisation du fauteuil roulant de style poussette TOM5 Streeter.

- LES SACS FIXÉS À LA POIGNÉE DE POUSSÉE AFFECTENT LA STABILITÉ DE LA POUSSETTE
- NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SANS SURVEILLANCE
- CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE LA POUSSETTE:
  - Mini: 35 kg, STD: 40 kg, Maxi: 50 kg
- **AVERTISSEMENT !** Gardez les doigts et les housses loin de toute pièce mobile lorsque vous utilisez la poussette.
- **AVERTISSEMENT !** Ne laissez jamais un enfant sans surveillance! Même si les courroies et les freins sont utilisés.
- **AVERTISSEMENT !** Vérifiez avant utilisation que tous les dispositifs de verrouillage sont correctement fixés et que tout l'équipement de sécurité est utilisé correctement.
- **AVERTISSEMENT !** L'unité de siège ne convient pas à un enfant de moins de 6 mois.
- **AVERTISSEMENT !** Ce produit ne doit pas être utilisé pendant le jogging ou le patin à roues alignées.
- Le préposé doit connaître les instructions de ce manuel.
- Un avis médical professionnel concernant l'adéquation de ce produit doit être recherché avant utilisation.
- Assurez-vous toujours, avant de partir, que l'enfant est à l'aise et que les vêtements et les couvertures, etc., sont rangés, afin qu'ils ne soient pas pris dans les roues.
- Assurez-vous que l'enfant est libre de pièces mobiles avant de faire des ajustements,

afin d'éviter toute blessure.

- Lorsque vous positionnez l'angle et réglez l'assise et le dossier, agissez en conséquence pour éviter les mouvements brusques et incontrôlés.

- Ne laissez pas l'enfant monter sans aide dans la poussette et en sortir.
- Serrez toujours les freins de stationnement lorsque vous mettez l'enfant dedans et sortez-le de la poussette.
- Assurez-vous que les ceintures et autres accessoires de fixation, la barre de sécurité et les autres équipements sont correctement ajustés.
- Ne vous tenez pas sur le repose-pieds.
- Les freins doivent toujours être enclenchés lorsque la poussette ne bouge pas.
- Franchir le trottoir : Entraînez-vous d'abord à utiliser une poussette vide.
- La poussette n'est pas conçue pour être utilisée dans les escaliers .
- Le préposé doit prendre des précautions contre les risques d'incendie. Dans les bâtiments, vérifiez l'emplacement des sorties de secours et assurez-vous que toutes les procédures sont comprises.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la poussette ou s'y accrocher.
- Ne surchargez pas la poussette. La surcharge du châssis, du siège, du sac ou du panier entraîne une réduction de la stabilité de la poussette.
- Faites attention, lors de la manipulation de la poussette, afin de ne pas blesser l'enfant ou vous-même.
- Si c'est possible, utilisez toujours des rampes ou des ascenseurs pour éviter toute restriction d'accès .
- Si possible, deux personnes doivent soulever la poussette.
- Lorsque vous utilisez la poussette sur la route, suivez le code de la route.
- N'utilisez pas la poussette à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- La poussette est conçue pour transporter un seul enfant à la fois.
- N'utilisez rien d'autre que des accessoires originaux PATRON conçus pour ce produit.
- Lorsque la poussette est pliée et dépliée, le Guide de l'utilisateur doit être suivi attentivement, afin d'éviter tout dommage à la construction qui pourrait affecter la stabilité du produit.
- En cas de défauts apparents, ce qui limite la sécurité d'utilisation du produit (par exemple, châssis endommagé, pièce détachée ou autres défauts visibles, fissures, etc.), il est nécessaire de cesser immédiatement d'utiliser le produit et de contacter votre distributeur officiel local ou votre centre de service.
- Syntek ErgoCare n'assume aucune responsabilité pour les dommages et/ou accidents résultant d'une utilisation inappropriée de ce produit.

## **Transport**

Le fauteuil roulant de type poussette TOM5 Streeter a passé avec succès les tests d'impact. Le siège est conforme à la norme ISO 7176-19. Les tests ont été effectués dans toutes les configurations possibles du produit.

Pour être conforme, la poussette doit avoir l'option de transit qui comprend 4 dispositifs d'arrimage.

# Vue d'ensemble de la Tom5 Streeter

## SCHÉMA



## DESCRIPTION DU SCHÉMA

1. Poignée à pousser	16. Roue arrière
2. Charnière de réglage de la hauteur de la poignée de poussée	17. Frein de stationnement
3. Relâchement du pliage de la poignée	18. Paniers
4. Dossier	19. Écrous en plastique à réglage de la largeur



	du siège
5. Boulons hexagonaux de réglage de la hauteur du dossier	20. Levier de réglage de l'angle du repose-pieds
6. Écrous en plastique réglables en hauteur du dossier	21. Boulons hexagonaux de réglage de la profondeur du siège
7. Levier de réglage inclinable du dossier	22. Boulons hexagonaux de réglage de la hauteur du repose-pieds
8. Supports d'auvent	23. Boulons hexagonaux de réglage de l'angle du repose-pieds
9. Goupille de sécurité de verrouillage d'interface	24. Plaque coulissante de réglage de l'angle du repose-pieds
10. Verrouillage de l'interface	25. Bande Velcro de repose-pieds
11. Levier de réglage inclinable dans l'espace	26. Repose-pieds
12. Barre de sécurité	27. Couvercle de cadre rembourré
13. Repose-pieds	28. Protecteurs latéraux
14. Roue pivotante avant	29. Prises de sécurité pour le transport
15. Serrure pivotante	

## Spécifications techniques

Mensurations	Mini	Standard	Maxi
Hauteur du dossier *	17,3 à 22,4	20.1–26.8	21,7 à 27,6
Profondeur d'assise *	7,3 à 10,6	9,1 à 13,0	11,4 à 15,8
Largeur du siège *	8,7 à 11,0	9,8 à 13,8	10,6 à 15,4
Siège au repose-pieds *	3,5 à 10,2	4,7 à 14,2	4,7 à 15,4
Angle du dossier (°)	0 à 170	0 à 170	0 à 170
Angle d'assise (°)	+38 /-28	+38 /-28	+38 /-28
Longueur totale *	30.3	30.3	30.3
Largeur totale *	23.4	25.2	26.6
Hauteur totale/avec Poignée *	37,4 / 43,3	37,4 / 43,3	38,2 / 46,5
Poids total *	18 kg	19 kg	20 kg
Charge maximale *	40 kg	40 kg	50 kg
Longueur de la poussette pliée	33.8	34.6	35.0
Largeur de poussette pliée	23.4	25.2	26.6
Hauteur de la poussette pliée	14.6	15.4	16.9

\*pouces

Configuration

Contenu de la boîte

Lors de la livraison, vous recevrez une (1) boîte contenant la poussette et les accessoires commandés. Le seul outil requis pour l'assemblage est une clé hexagonale qui se trouve dans une petite poche à l'arrière du dossier. Remettez toujours la clé à sa place.

### Liste des éléments :

- Unité de siège amovible et réversible pour fauteuil roulant de style poussette
- Cadre de fauteuil roulant de style poussette
- Couvercles de support de maintien
- Housses de cadre rembourrées
- Protectors latéraux
- Accessoires
- Ceinture 5 points

### Déballage du Tom5 Streeter

- 1- Retirez le contenu des boîtes et placez-le sur une surface plane.
- 2- Assurez-vous que le matériel correspond à ce que vous avez commandé et qu'aucun dommage n'a été causé pendant le transport.
- 3- Suivez les instructions de la section suivante (Assemblage du Tom5 Streeter).

## **Assemblage du Tom5 Streeter**

Les instructions du Guide de l'utilisateur vous guideront tout au long du processus d'assemblage du fauteuil roulant de type poussette. Cependant, il est recommandé que l'ajustement initial pour l'utilisateur soit effectué en présence d'un représentant Syntik ErgoCare.

**NOTE! Les chiffres entre parenthèses renvoient au schéma présenté à la page 6.**

### Dépliage du cadre de fauteuil roulant de style poussette (sans le siège)

- 1- Placez le cadre de la poussette pliée sur ses roues.
- 2- Détachez et relâchez le cran de sécurité de transport (29) sur le cadre.
- 3- Pour déplier le cadre de la poussette, restez entre les roues arrière et tenez fermement la poignée (1). Déplacez la poignée vers le haut et vers l'arrière jusqu'à ce que le déverrouillage de la poignée rabattable (3) soit complètement verrouillé dans sa position d'extrémité.
- 4- Pour vérifier la position de verrouillage, déplacez la poignée vers le haut pour vous assurer que les deux mécanismes sont complètement verrouillés (le cadre de la poussette ne doit pas commencer à se replier vers l'intérieur).

### Montage du siège en position orientée vers l'avant

- 1- Assurez-vous que le cadre de la poussette est déplié et verrouillé en position

- dépliée. (voir la section précédente).
- 2- Tenez le siège de manière à ce qu'il soit orienté vers l'avant de la poussette.

- 3- Faites glisser les adaptateurs tubulaires d'interface de siège directement dans les prises d'interface siège-cadre.  
Commencez par insérer un seul côté des adaptateurs tubulaires de l'interface du siège dans la prise d'interface OPEN (sans broches de verrouillage).
- 4- Poussez le deuxième côté vers le bas pour que le siège se verrouille automatiquement (vous entendrez le bruit de verrouillage).
- 5- Enfin, vérifiez si le siège est correctement verrouillé en soulevant légèrement l'unité de siège. Le siège ne doit pas se séparer du cadre de l'interface.

#### Montage du siège en position orientée vers l'arrière:

- 1- Assurez-vous que le cadre de la poussette est déplié et verrouillé en position dépliée. (voir la section précédente).
- 2- Tenez le siège de manière à ce qu'il soit orienté vers l'arrière de la poussette.
- 3- Faites glisser les adaptateurs tubulaires d'interface de siège directement dans les prises d'interface siège-cadre.  
Commencez par insérer un seul côté des adaptateurs tubulaires de l'interface du siège dans la prise d'interface OPEN (sans broches de verrouillage).
- 4- Poussez le deuxième côté vers le bas pour que le siège se verrouille automatiquement (vous entendrez le bruit de verrouillage).
- 5- Enfin, vérifiez si le siège est correctement verrouillé en soulevant légèrement l'unité de siège. Le siège ne doit pas se séparer du cadre de l'interface.

#### Installation du protecteur latéral

- 1- Fixez les deux (2) clips en plastique du protecteur au tube vertical sur le côté du dossier.
- 2- Répétez l'opération pour l'autre protecteur.



## 5- Installation de courroies ponctuelles

- a) Faites passer les sangles inférieures entre le dossier (4) et les coussins latéraux et à travers les boucles inférieures des cames et fixez-les en doublant la sangle. Dans une situation où il y a deux accessoires fixés par les boucles de came, passez les sangles à travers les boucles de came une seule fois.
- b) Soulevez le coussin de tête .
- c) Faites passer les sangles supérieures (minces) à travers les trous du panneau du dossier et passez-les à travers les boucles supérieures des cames, puis fixez-les en doublant la sangle. Dans une situation où il y a deux accessoires fixés par les boucles de came, passez les sangles à travers les boucles de came une seule fois.



## Installation du couvercle de cadre rembourré

- a) Fixez le couvercle rembourré autour du tube de la poignée et au-dessus du déverrouillage rabattable de la poignée (3).




# Ajustement

Avant de placer l'enfant dans la poussette, ajustez la hauteur du dossier, la profondeur et la largeur de l'assise et installez les accessoires souhaités.

## 1. Unité de siège inclinable dans l'espace

- a) Dézippez partiellement le couvercle rembourré droit du cadre (27) de bas en haut pour pouvoir toucher le levier inclinable (pic.5).
- b) Tenez fermement le dossier du siège d'une seule main.
- c) Tirez le levier inclinable dans l'espace du siège (11) avec votre autre main et définissez la position souhaitée du siège (pic.5). Relâchez le levier et rezippez le

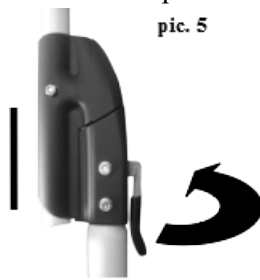

couvercle rembourré du cadre.

## 2. Réglage de la profondeur du siège

- a) Retirez la sellerie de la base du siège (fixée par des attaches Velcro).
- b) Desserrez les deux boulons hexagonaux (21) situés sous la partie médiane frontale du siège à l'aide de la clé hexagonale.
- c) Desserrez à la main les quatre écrous de réglage en plastique situés sous le siège (19).
- d) Réglez la profondeur d'assise souhaitée en tirant ou en poussant l'extrémité avant du siège.
- e) Serrez correctement tous les boulons hexagonaux et les écrous en plastique et réinstallez la sellerie de la base du siège.

## 3. Réglage de la largeur de la base du siège

- a) Retirez la sellerie de la base du siège des plaques latérales.
- b) Desserrez à la main les quatre écrous de réglage en plastique situés sous le siège (19).
- c) Réglez la largeur du siège en tirant ou en poussant les plaques latérales.
- d) Serrez correctement tous les écrous en plastique et réinstallez le rembourrage du panneau latéral.

## 4. Réglage de l'angle du dossier

- a) Tenez fermement le dossier du siège .
- b) Levier de réglage inclinable du dossier lâche (7).

- c) Réglez le dossier à l'angle souhaité.
- d) Serrez correctement le levier .



- e) Si nécessaire, dézippez partiellement la partie arrière de la housse du dossier pour faciliter la manipulation.
- f) Assurez-vous que le dossier est complètement verrouillé en poussant et en tirant doucement dessus. Le dossier doit rester en position prédéfinie.

#### 5. Réglage de la hauteur du dossier

- a) Retirez la sellerie du dossier à l'arrière et à l'avant du dossier (fixé par des attaches Velcro).
- b) Desserrez les deux boulons hexagonaux situés sur la partie supérieure arrière du dossier (5).
- c) Desserrez les deux écrous en plastique situés à l'arrière du dossier (6).
- d) Réglez la hauteur du dossier en soulevant ou en appuyant dessus.
- e) Serrez correctement tous les boulons hexagonaux et les écrous en plastique et réinstallez le rembourrage du dossier.

#### 6. Réglage de l'angle du repose-pieds

- a) Tenez fermement le repose-pieds (13).
- b) Relâchez le levier de réglage de l'angle du repose-pieds (20).
- c) Réglez le repose-pieds à l'angle souhaité.
- d) Serrez correctement le levier pour le fixer en position.

#### 7. Réglage de la hauteur du repose-pieds

- a) Desserrez les deux boulons hexagonaux situés à l'arrière de la barre coulissante du repose-pieds (22).
- b) Réglez la hauteur du repose-pieds sur la position souhaitée.
- c) Serrez correctement les deux boulons hexagonaux.

#### 8. Réglage de l'angle du repose-pieds

- a) Desserrez les deux boulons hexagonaux situés sous le repose-pieds (23).
- b) Réglez l'angle du repose-pieds en tirant ou en poussant sur la plaque coulissante de réglage de l'angle du repose-pieds (24).
- c) Serrez correctement les deux boulons hexagonaux.

#### 9. Réglage du verrouillage Velcro du repose-pieds

La bande de sécurité Velcro est un dispositif de sécurité qui empêche le repose-pieds de se replier vers l'intérieur.

- a) Serrez et fixez la bande de sécurité Velcro située sous le repose-pieds (25) pour vous assurer que la position du repose-pieds est bien fixée.

## Utilisation quotidienne

Synetik ErgoCare recommande d'effectuer une inspection quotidienne avant d'asseoir un enfant dans le TOM 5 Streeter.

### Frein de stationnement

- 1- Pour régler le frein , appuyez sur la plaquette du levier de frein des deux côtés jusqu'à la position finale (pic.9)
- 2- Pour débrayer le frein de stationnement, soulevez les deux plaquettes du levier de frein.



### Serrure pivotante

- 1- Si nécessaire, la roue avant pivotante peut être verrouillée.
- 2- Pour verrouiller les fourches roulettes, soulevez et tournez la goupille de verrouillage pivotante de 90° des deux côtés et laissez-la tomber dans le trou prévu à cet effet sur la fourche pivotante (pic.10).




### Réglage de la hauteur de la poignée

- 1- Pour modifier la position de la hauteur de la poignée , appuyez simultanément sur les boutons en plastique noir situés sur les charnières de la poignée des deux côtés (2).
- 2- Réglez la poignée à la position souhaitée, relâchez les boutons.
- 3- La poignée se verrouillera automatiquement dans une nouvelle position; Vous entendrez le son de verrouillage.

### Déplier la poussette (avec le siège)

- 1- Placez la poussette pliée sur ses roues.
- 2- Détachez et relâchez le cran de sécurité de transport (29) sur le cadre.
- 3- Pour déplier le cadre de la poussette, restez entre les roues arrière et tenez fermement la poignée (1).
- 4- Déplacez la poignée vers le haut et vers l'arrière jusqu'à ce que le déverrouillage de la poignée rabattable (3) soit complètement verrouillé dans sa position d'extrémité.
- 5- Pour vérifier la position de verrouillage, déplacez la poignée vers le haut pour vous assurer que les deux mécanismes sont complètement verrouillés (le cadre de la poussette ne doit pas commencer à se replier vers l'intérieur).
- 6- Tirez sur le levier de réglage de l'inclinaison du siège dans l'espace (pic.5) et déplacez le siège à la position requise.
- 7- Tirez les couvercles rembourrés du cadre (27) vers le bas sur le mécanisme de verrouillage et zippez les deux couvercles vers le haut.
- 8- Relâchez le levier de réglage inclinable du dossier (7) et réglez la position du dossier.
- 9- Serrez correctement le levier lorsque l'angle de dossier souhaité est atteint.
- 10- Relâchez le levier de réglage de l'angle du repose-pieds (20), réglez le repose-pieds (13) dans la position souhaitée et serrez le levier.

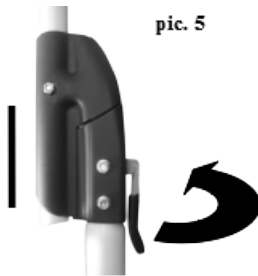


### Pliage de la poussette (avec siège attaché)

- 1- Serrez le frein de stationnement.
- 2- Relâchez le levier de réglage de l'angle du repose-pieds .
- 3- Réglez la position du repose-pieds un peu moins qu'horizontalement (pic.4).
- 4- Relâchez la bande de sécurité Velcro du repose-pieds et repliez le repose-pieds (pic.4).
- 5- Relâchez le levier de réglage de l'inclinaison du dossier et poussez le dossier aussi loin que possible vers l'avant, vers la base du siège. (photo 6).
- 6- Serrez à nouveau le levier.
- 7- Dézippez partiellement les couvercles rembourrés du cadre et tirez-les sur le mécanisme de

- verrouillage.
- 8- Tirez vers le haut le levier de réglage de l'inclinaison du siège dans l'espace (pic.5) et réglez la position du siège pour qu'il s'incline au maximum vers l'avant (pic.6).

- 9- Soulevez les pièces mobiles de la poignée de poussée rabattable (pic.6) des deux côtés et repliez la poignée de poussée vers l'avant vers les roues avant.
- 10- Fixer le loquet de sécurité du transport (pic.14).
- 11- La poussette est pliée (pic.7).

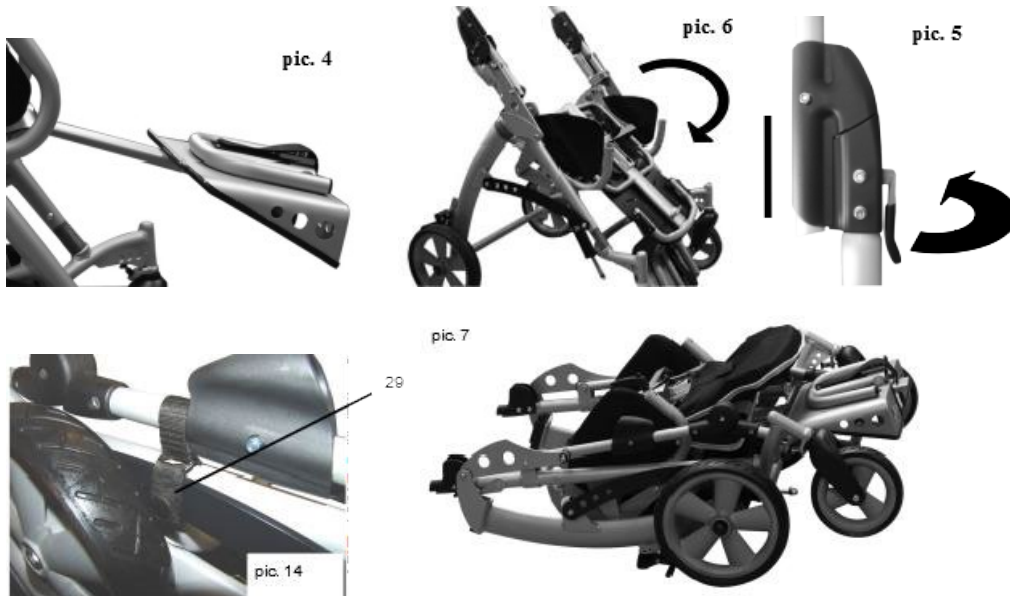

### Entrer dans la poussette

- 1- Réglez le frein de stationnement. Si nécessaire, demandez à une personne compétente de vous aider à tenir la poussette fermement.
- 2- Placez soigneusement l'enfant dans la poussette .
- 3- Attachez la ceinture de sécurité.
- 4- Ajustez la position du repose-pieds .
- 5- Ajustez toutes les fixations et accessoires de positionnement dont la poussette est équipée.
- 6- Assurez-vous toujours que l'enfant est confortablement assis dans la poussette.

### Sortir de la poussette

- 1- Enclencher le frein de stationnement. Si nécessaire, demandez à une personne compétente de vous aider à tenir fermement la poussette.
- 2- Retirez tous les accessoires de fixation et de positionnement appliqués.
- 3- Détachez la ceinture de sécurité.
- 4- Sortez soigneusement l'enfant de la poussette.

### Escalier de négociation

Pour faciliter les déplacements :

1. Utilisez les rampes et les ascenseurs lorsqu'ils sont disponibles.
2. Dans la mesure du possible, les escaliers doivent être évités, s'il existe une alternative à l'utilisation des escaliers.
3. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous qu'au moins un assistant est disponible pour fournir de l'aide.
4. N'essayez pas de monter ou de descendre la poussette dans un escalier à moins que vous et votre assistant ne soyez sûrs d'avoir le contrôle de la poussette et de pouvoir la supporter ainsi que le poids de son occupant.
5. Ne soulevez pas la poussette par le repose-pieds.

Si aucune alternative n'est possible, suivez ces instructions :

Descendre les escaliers:

- 1- Positionnez la poussette carrément avec les roues avant sur la marche supérieure.
- 2- Inclinez lentement la poignée de poussée vers l'arrière et poussez délicatement la poussette vers l'avant jusqu'à ce que les roues arrière soient sur la marche supérieure.
- 3- L'assistant se tient devant, abaissant régulièrement la poussette en s'accrochant fermement au cadre avant.
- 4- Supportez le poids et abaissez délicatement les roues arrière dans les escaliers.
- 5- Continuez étape par étape vers le bas. (Photo 19)



Pic.19

En montant les escaliers :

- 1- Placez la poussette carrément avec les roues arrière contre la marche inférieure.
- 2- Inclinez lentement la poussette vers l'arrière et relevez-la vers l'étape suivante.
- 3- L'assistant se tient devant, stabilise et soulève la poussette en s'accrochant fermement au cadre avant.
- 4- Continuez étape par étape jusqu'au sommet (Photo 20)



Pic.20

Négocier des restrictions ou des étapes simples

En bas:

1. Placez les roues arrière au bord du trottoir.



2. Tenez fermement les poignées de poussée et inclinez légèrement la poussette vers l'arrière.
3. Équilibrez sur les roues arrière, abaissez soigneusement la poussette du trottoir sur ses roues arrière.
4. Ne faites jamais basculer la poussette vers l'avant sur un trottoir.

En

1. Placez les roues arrière sur le trottoir.
2. Avec une prise ferme sur les poignées poussoirs, inclinez la poussette vers l'arrière et placez les roues arrière sur le dessus du trottoir.
3. Placez les roues avant au bas du trottoir et soulevez jusqu'au niveau supérieur.

## Prudence

1. Pendant cette opération, le préposé et l'assistant doivent être bien positionnés et avoir une prise sûre sur la poussette.
2. Les mains du préposé doivent être à l'intérieur des sangles de la poignée de poussée en tout temps.
3. Reposez-vous à intervalles réguliers.
4. Ne soulevez pas la poussette par son
5. repose-pied.

## Accessoires

### Panier - Tissu

- 1- Fixez le panier sur un tube de châssis. **La capacité de charge maximale est de 3 kg.**



### Bloc de genou

- 1- Desserrez les deux boulons hexagonaux positionnés à l'arrière de la barre coulissante du repose-pieds et retirez le repose-pieds.
- 2- Installez le bloc genouillère.
- 3- Fixez-le en position et insérez les boulons dans les trous d'assemblage.
- 4- Réinstallez le repose-pieds dans la bonne position et serrez les deux boulons hexagonaux.

### Repos du mollet

- 1- Desserrez les deux boulons hexagonaux situés à l'arrière de la barre coulissante du repose-pieds et retirez le repose-pieds.
- 2- Installez le repose-mollet, fixez-le en position et insérez les boulons dans les trous d'assemblage.
- 3- Réinstallez le repose-pieds dans la bonne position et serrez les deux boulons hexagonaux.

### Basket-HD (Acier)

- 1- Vissez les adaptateurs de fixation du Basket-HD sur l'essieu arrière.
- 2- Fixez le panier à ces adaptateurs avec les vis.
- 3- Fixez le panier avec les ceintures et avec le velcro dans la partie avant de la poussette.

### Tilt-lock pour Spastic

- 1- Dévissez le levier de réglage de l'inclinaison du dossier .
- 2- Placez le verrouillage d'inclinaison dans la rainure où le levier se déplace et placez la deuxième partie de l'inclinaison-verrouillage sur la vis du levier.
- 3- Revissez le levier.

### Couvercle de support de barre d'appui

- 1- Placez le bouchon en plastique sur le support de la barre d'appui .
- 2- Installez le couvercle élastique et fixez l'élastique sur l'écrou en plastique situé sous le siège
- 3- Répétez la même procédure de l'autre côté.

### Protection latérale étendue

#### Montage –

- 1- Glissez la protection latérale étendue sur le dossier et sur les tubes de la poignée de poussée des deux côtés à l'aide des quatre boucles en plastique.
- 2- Les boucles supérieures vont entre le manchon en plastique de la poignée poussoir et le bouton de la poignée.
- 3- Les volets de la protection latérale étendue sont fixés avec une fermeture Velcro.
- 4- La partie inférieure de la protection latérale étendue est sécurisée par des bandes.

#### Position assise –

- 1- En position assise, il est important que la protection latérale étendue soit entrecroisée à l'arrière du dossier et sécurisée par une sangle et un verrou Velcro.
- 2- Cette sangle traverse des triangles en plastique près de la boucle supérieure et est fixée avec une fermeture Velcro.

#### Position semi-assise –

- 1- La protection latérale étendue est sécurisée par une sangle et une fermeture Velcro qui traverse un triangle en plastique.

#### Position plate –

- 1- Laissez la protection latérale étendue lâche.



### Footmuff - Été

- 1- Glissez le manchon sur le repose-pieds et fixez-le avec les fermetures à glissière autour du tube de la poignée poussée.



### Footmuff - Hiver

- 1- Fixez le manchon avec le caoutchouc sur le dossier (retirez la verrière si nécessaire) et attachez sa partie centrale au cadre de la poussette.
- 2- La bande de cuir prédécoupée cousue dans le manchon permet l'utilisation d'un bloc abducteur, d'une ceinture à 4 points, d'une ceinture à 2 points, d'un abducteur et d'un harnais de style H.

### Tableau de travail

- 1- Retirez le couvercle de la poignée poussoir (si nécessaire).
- 2- Placez les attaches de la planche de travail dans les trous.

### Réglage de la profondeur –

- 1- Relâchez les vis sous la planche, ajustez la profondeur et fixez correctement les vis.

### Réglage de l'angle –

- 1- Relâchez les leviers de chaque côté de la planche de travail, ajustez l'angle et serrez les vis.

### Sac

- 1- Fixez le sac à la poignée de poussée par ses sangles.
- 2- **Capacité de charge maximale 1 kg. Les sacs et sacs à dos attachés à la poignée de poussée affectent la stabilité de la poussette.**



### Baldaqin

#### Convenir

- 1- Retirez les rembourrages latéraux dans la partie supérieure du dossier et localisez les supports de la verrière
- 2- Insérez les clips en plastique de la verrière dans les deux supports de la verrière.
- 3- La verrière peut être ajustée en poussant sur le cadre de la verrière.

#### Enlever

- 1- Appuyez sur les déversoirs de raccord de la verrière et retirez la verrière des attaches de la hotte.



### Coin d'enlèvement

- 1- Placez l'enfant dans la poussette et localisez la position optimale pour le coin d'enlèvement.
- 2- Sortez l'enfant de la poussette.
- 3- Trouvez le trou de montage approprié sur la base du siège.
- 4- Placez le coin sur le siège (la partie la plus étroite doit pointer vers le dossier) et fixez la vis cale avec un écrou.



### Appui-tête (paire)

- 1- Asseyez l'enfant dans la poussette et déterminez la hauteur appropriée pour l'appui-tête.
- 2- Sortez l'enfant de la poussette.
- 3- Ajustez la hauteur du dossier .
- 4- Trouvez les trous de montage appropriés sur la face arrière de la base du dossier.
- 5- Insérez des vis à travers les fentes du rembourrage et de la base du dossier.
- 6- Fixez les vis de l'appui-tête avec des écrous.



### Ailes de tête

- 1- Placez l'enfant dans la poussette pour déterminer la hauteur appropriée des ailes de tête.
- 2- Sortez l'enfant de la poussette.
- 3- Installez les ailes de tête sur le dossier à la hauteur déterminée et fixez-les à l'aide de sangles velcro.



### Prote-cou

- 1- Écartez légèrement le coussin de l'appui-tête.
- 2- Fixez le repose-cou à l'aide de la sangle velcro.
- 3- Fermez le coussin.



### Repose-coffre latéral (paire)

- 1- Placez l'enfant dans la poussette et déterminez la hauteur appropriée pour les repose-coffres. (Les appuie-coffres doivent être un peu plus bas que les aisselles de l'occupant.)
- 2- Sortez l'enfant de la poussette.
- 3- Dézippez les fermetures éclair du dossier.
- 4- Localisez les trous de montage appropriés sur la face arrière de la base du dossier en fonction de l'emplacement requis.
- 5- Coupez les fentes à travers le rembourrage tant que les plaques métalliques du coffre repose-linge.
- 6- Placez les plaques métalliques des repose-coffres à travers les fentes où vous venez de couper le rembourrage.
- 7- Placez les vis à travers les trous de la base du dossier et fixez-les en place avec des écrous.
- 8- Vous pouvez ajuster la largeur souhaitée des appuie-coffres latéraux à l'aide des fentes horizontales dans les plaques métalliques des appuie-coffres latéraux.



### Support lombaire (1.25cm, 35cm )

- 1- Dézippez les fermetures éclair du dossier.
- 2- Déterminez la hauteur appropriée du support lombaire.
- 3- Coupez des fentes de 5 cm à travers le rembourrage.
- 4- Faites passer le Velcro de support lombaire à travers les fentes du dossier.
- 5- Soulevez les côtés du rembourrage du dossier et collez la deuxième partie de la bande velcro sur la plaque métallique.



### Coin de dossier

- 1- Décollez le rembourrage du dossier (avec velcro)
- 2- Collez le coin du dossier à la hauteur souhaitée à l'aide de velcro
- 3- Remettez le rembourrage en place.



## 2- Ceinture de pointe

### Convenir

- 1- Fixez la ceinture dans les boucles de came en plastique les plus basses à l'arrière du dossier.

### Ajuster

- 1- Desserrez la fixation.
- 2- Asseyez l'enfant dans la poussette et ajustez la longueur de la ceinture.
- 3- Pour ajuster la longueur de la ceinture, utilisez les boucles de came en plastique à l'arrière du dossier.
- 4- L'enfant doit toujours se sentir à l'aise lorsqu'il utilise la ceinture.



## 4- Ceinture de pointe

### Montage

- 1- Faites passer les sangles inférieures entre le dossier et les coussins latéraux et fixez-les à l'aide des boucles de came en plastique situées à l'arrière du dossier.
- 2- Faites passer les sangles supérieures à travers les fentes appropriées dans le dossier et fixez-les à l'aide des boucles de came en plastique supérieures à l'arrière du dossier. Dans une situation où il y a deux accessoires fixés par les boucles de came, passez les sangles à travers les boucles de came une seule fois, sinon passez-les à travers les boucles en sens inverse pour les fixer.

### Paramètres et réglages.

- 1- Relâchez les trois attaches de ceinture, asseyez l'enfant dans la poussette.
- 2- Réglez la longueur de bracelet souhaitée à l'aide de boucles de came en plastique.
- 3- D'autres réglages avec la ceinture doivent être effectués à l'aide de la boucle de came en




plastique .



### Ceinture thoracique Ajout à la ceinture 4 points

- 1- L'ajout de ceinture thoracique est installé sur les sangles supérieures (plus fines) de la ceinture à 4 points.

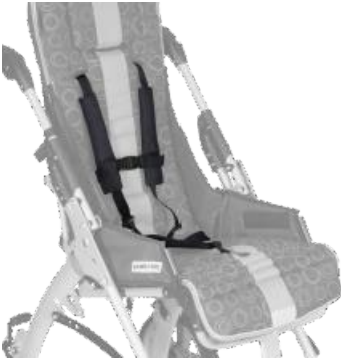

### Harnais de poitrine

#### Convenir

- 1- Placez l'enfant dans la poussette et déterminez la hauteur de ceinture appropriée .
- 2- Sortez l'enfant de la poussette.
- 3- Fixez la ceinture sur le dossier avec les ceintures, les attaches et les sangles Velcro.

#### Usage

- 1- Défaites la sangle velcro avant.
- 2- Asseyez l'enfant dans la poussette et attachez la sangle velcro pour positionner l'enfant.
- 3- L'enfant doit toujours se sentir à l'aise lorsqu'il utilise la ceinture.



### Harnais de pieds

- 1- Fixez les sangles des harnais de pieds à l'aide de la fermeture éclair.
- 2- Les pieds de l'enfant sont immobilisés par une sangle velcro.
- 3- L'enfant doit toujours se sentir à l'aise lorsqu'il utilise les harnais de pieds.



### Harnais de style H

#### Montage

- 1- Faites passer les sangles inférieures entre le dossier et les coussins latéraux, puis passez-les à travers les boucles inférieures en plastique placées sur la plaque arrière du dossier. Dans le cas où il y a deux accessoires fixés par les boucles de came, passez les sangles à travers les boucles de came une seule fois, sinon passez-les à travers les boucles en sens inverse pour les fixer.
- 2- Faites passer les sangles supérieures à travers les fentes appropriées dans le dossier et passez-les à travers les boucles de came supérieures en plastique situées sur la plaque arrière du dossier. Dans une situation où il y a deux accessoires fixés par les boucles de came, passez les sangles à travers les boucles de came une seule fois, sinon passez-les à travers les boucles à l'envers pour les fixer.

#### Paramètres et réglages

- 1- Ouvrez les boucles de came en plastique et repliez le harnais.
- 2- Placez l'enfant dans la poussette, mettez le harnais et fixez-le à l'aide des boucles.
- 3- Ajustez la longueur des sangles avec le clip en plastique.

4- D'autres réglages doivent être effectués à l'aide des boucles de came en plastique.



### Gilet d'immobilisation

#### Montage

- 1- Faites passer les sangles inférieures entre le dossier et les coussins latéraux, puis passez-les à travers les boucles inférieures en plastique situées sur la plaque arrière du dossier. Dans le cas où il y a deux accessoires fixés par les boucles de came, passez les sangles à travers des boucles d'environ m une seule fois, sinon passez-les à travers les boucles en marche arrière pour les fixer.
- 2- Faites passer les sangles supérieures à travers les fentes appropriées dans le dossier et passez-les à travers les boucles de came supérieures en plastique situées sur la plaque arrière du dossier. Dans le cas où il y a deux accessoires fixés par les boucles de came, passez les sangles à travers les boucles de came une seule fois, sinon passez-les à travers les boucles en sens inverse pour les fixer.

#### Réglage et réglages

- 1- Dézippez le gilet.
- 2- Déverrouillez les boucles de ses sangles.
- 3- Placez l'enfant dans la poussette,
- 4- Zippez le gilet et verrouillez les boucles.
- 5- Ajustez la longueur des sangles avec un clip en plastique.
- 6- D'autres ajustements doivent être effectués à l'aide de boucles.



### Ceinture d'enlèvement

#### Montage

- 1- Faites passer les sangles Velcro à travers l'espace entre la sellerie du dossier et l'assise.
- 2- Placez les sangles derrière le tube arrière du siège et fixez la sangle à l'aide du velcro.
- 3- Faites passer les sangles supérieures plus minces entre le dossier et les coussins latéraux et fixez-les avec les boucles supérieures en plastique situées sur la plaque arrière du dossier. Dans une situation où il y a deux accessoires fixés par les boucles de came, passez les sangles à travers les boucles de came une seule fois, sinon passez-les à travers les boucles en retour pour les fixer.

#### Paramètres et réglages

- 1- Détachez les boucles et asseyez l'enfant dans la poussette.
- 2- Fixez les boucles.
- 3- Ajustez la longueur des sangles avec les boucles de came en plastique .
- 4- D'autres ajustements doivent être effectués en utilisant uniquement les boucles en plastique .




### Couverture de pluie

- 1- La housse de pluie doit être tirée sur la poussette, de sorte que la verrière et le repose-pieds soient complètement recouverts.
- 2- Ne conservez que lorsque la couverture est propre et sèche.




Option de transport en commun : 010-186

1. Pendant le transport, la poussette de chaise doit être orientée vers l'avant.
2. Les dispositifs d'arrimage de la poussette doivent être solidement fixés aux quatre points d'ancrage rouges de la poussette. Voir la photo ci-dessus pour les points d'ancrage.
3. Toutes les sangles d'arrimage au sol doivent être serrées à l'avant et à l'arrière pour éliminer tout mouvement vers l'avant ou vers l'arrière de la poussette. Voir les photos A1 à A6.

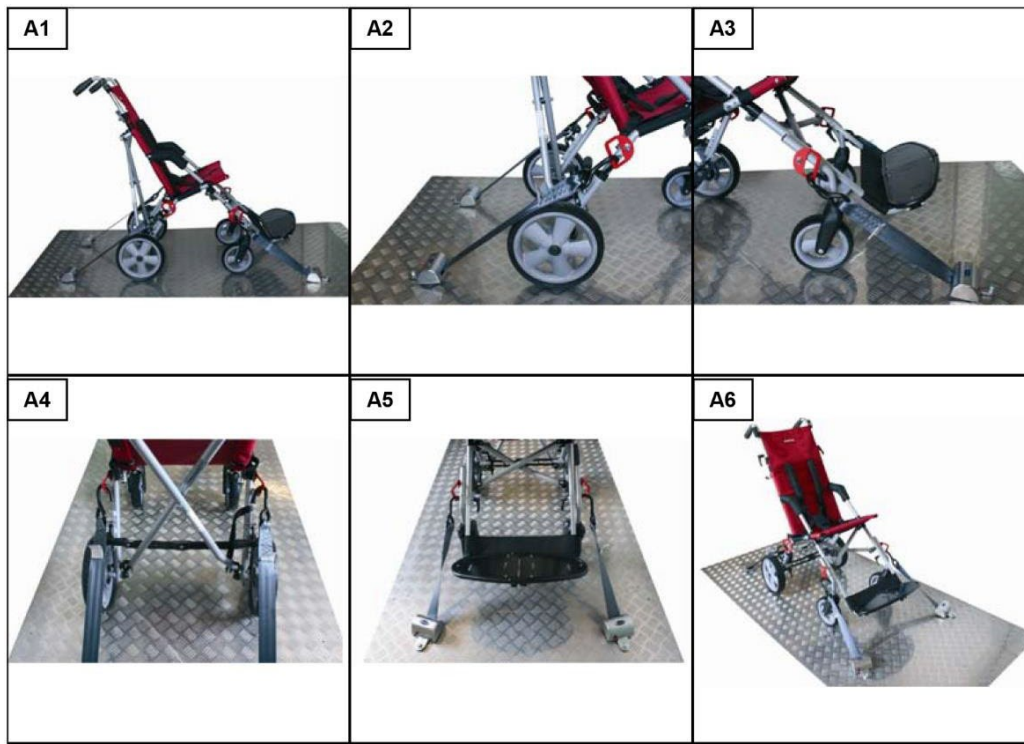

4. Installez la ceinture à 3 points du système d'ancrage comme indiqué aux figures B1 à B5.

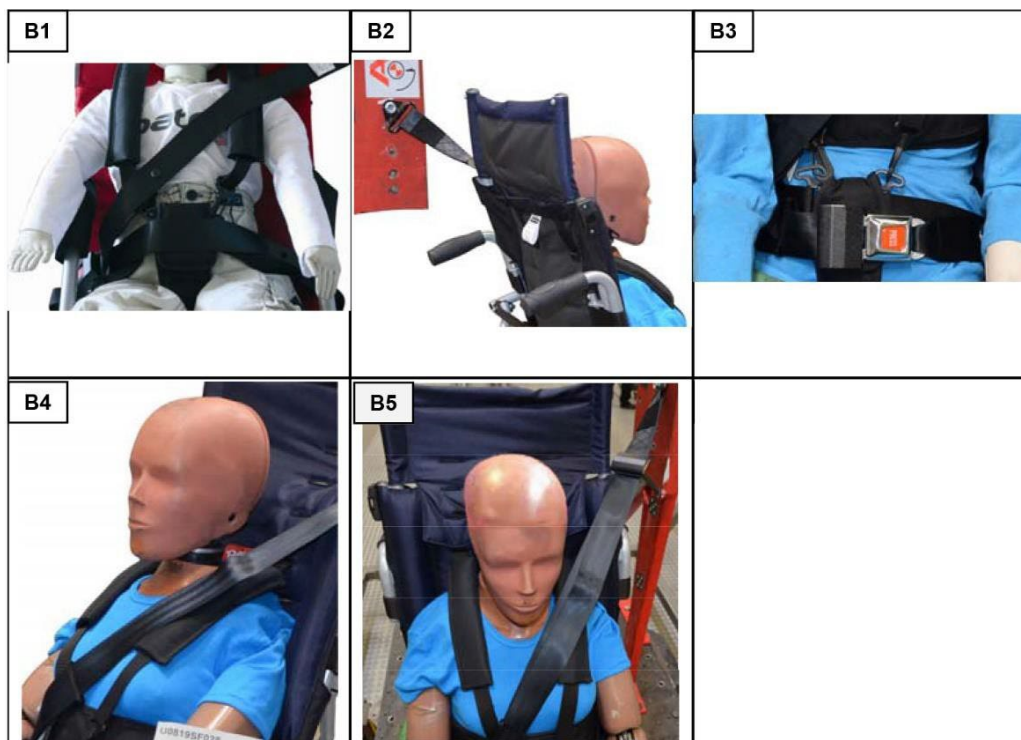

5. Les instructions du fabricant du dispositif de retenue de poussette doivent être suivies avec précision pour assurer les performances prévues.

## Instructions de nettoyage

La sellerie est détachable. Il peut être nettoyé à l'eau tiède (max. 40 °C) et un détergent doux. Si nécessaire, un rembourrage de remplacement peut être acheté.

### Retrait du rembourrage

- 1- Du haut du cadre, annulez les boutons-pression métalliques situés de chaque côté de la poussette.
- 2- Desserrez les attaches Velcro de la ceinture à 5 points et retirez toutes les sangles.
- 3- Tirez doucement sur le rembourrage du dossier jusqu'à ce qu'il se détache du cadre.
- 4- Abaissez doucement le siège et le rembourrage du mollet jusqu'à ce qu'il se détache du cadre.
- 5- Pour refixer le rembourrage, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

## Entretien

Synetik ErgoCare recommande qu'une inspection visuelle quotidienne de l'équipement soit effectuée par un thérapeute, un parent ou un soignant afin d'assurer l'utilisation sécuritaire du produit.

- Votre poussette a été conçue à un niveau élevé et, avec une utilisation et un entretien corrects, fournira de nombreuses années de service sans problème.
- Inspectez régulièrement les dispositifs de verrouillage, les prises, les repose-pieds et les



cerclages articulaires pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et en parfait état de fonctionnement.

- Les freins, les roues, les pneus sont sujets à l'usure et doivent être remplacés, au besoin, par un réparateur autorisé approuvé par le fournisseur de poussettes.
- Nous recommandons que la poussette soit vérifiée par un réparateur autorisé tous les 12 mois.
- Nous vous recommandons de vous rendre dans un service après-vente agréé après 24 mois.
- Si la poussette est endommagée ou a besoin d'être réparée, le réparateur autorisé sera en mesure de confirmer ce qui est requis.
- Alternativement, le département de service à la clientèle Synetik ErgoCare est disponible pour les informations sur les produits.
- Seul PATRON Bohemia a.s. Des pièces de rechange doivent être utilisées sur cette poussette.
- Si certaines parties de votre poussette deviennent rigides ou difficiles à utiliser (pas plus de tous les 6 mois), assurez-vous que la saleté n'en est pas la cause, appliquez une légère couche d'un lubrifiant pulvérisé, par exemple WD 40 (n'utilisez pas d'huile ou de graisse). Assurez-vous que le lubrifiant pénètre entre les composants, mais ne pas trop pulvériser car cela pourrait favoriser l'accumulation de saleté. Essuyez tout excès de pulvérisation. Une lubrification régulière des pièces mobiles prolongera la durée de vie de votre poussette et facilitera l'ouverture et le pliage de la poussette.
- Assurez-vous que vous êtes familier avec le fonctionnement de la poussette. Il doit toujours s'ouvrir et se plier facilement. Si ce n'est pas le cas, ne le forcez pas. Arrêtez-vous et lisez les instructions.
- Les roues, les pièces en plastique et en métal peuvent être essuyées avec de l'eau tiède et un détergent doux.
- Le tissu du siège peut être lavé à la main (Max. 30 °C).
- Ne nettoyez jamais avec des nettoyants abrasifs, à base d'ammoniac, à base d'eau de Javel ou à essence.
- Après une exposition à des conditions humides, sécher avec un chiffon doux et laisser complètement ouvert dans un environnement chaud.
- Rangez votre poussette dans un endroit sûr et sec.
- Vérifiez et serrez régulièrement les raccords à vis.
- S'il y a des câbles de commande usagés (freins, télescopes, inclinaison), vérifiez-les régulièrement et, si nécessaire, huilez-les.
- Synetik ErgoCare se réserve le droit d'apporter des modifications de conception à l'un de ses produits sans préavis dans le cadre de son programme de développement continu.